

Dental Excellence
in jedem Bereich.



Praxisausstattung

KaVo Behandlungseinheiten, Behandlungsleuchten, Behandlerstühle, Patientenkommunikationssystem, Dentalmikroskope und weiteres Zubehör für die zahnärztliche Praxis.



Instrumente

Dentale Hand- und Winkelstücke, Turbinen, Pulverstrahlhandstücke und Kleingeräte für alle Anwendungsgebiete von Diagnostik über Prophylaxe bis hin zu Restauration, Chirurgie, Endodontie und Instrumentenpflege.



Imaging

Intraorale Strahler, Sensoren und Speicherfolien, Panorama- und Fernröntgen, auch mit DVT Kombination, sowie dedizierte DVT Geräte für jede Indikation in der Zahnmedizin.



CAD/CAM

Dentale CAD/CAM Lösungen für hochästhetische, naturidentische und langlebige Restaurationen, passend für Zahnärzte und Zahntechniker.

Die in diesem Katalog gezeigten und beschriebenen Produkte und Ausstattungen sowie Dienstleistungen sind nicht in allen Ländern erhältlich. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. KaVo Dental GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für Abweichungen in Farbe und Form von den Abbildungen, Irrtümer sowie Druckfehler und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Prospekten zu machen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der KaVo Dental GmbH.

Scan eXam™ und KaVo™ sind Marken der Kaltenbach & Voigt GmbH und sind entweder eingetragene Marken oder werden als Benutzungsmarken verwendet in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. iDOT™ ist entweder eine eingetragene Marke oder eine Benutzungsmarke der Kavo Kerr Group Finland in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

KV_07_17_0026_REVO © Copyright KaVo Dental GmbH.

Scan eXam™ One

Die schnelle, zuverlässige Kompaktlösung für die digitale intraorale Bildgebung.



Dental Excellence für jede Zahnarztpraxis.

Scanner-Auflösung 17 lp/mm. Farbtiefe 16 Bit.



Optional: Okklusale 4C-Projektion.



Scan eXam™ One – perfekt für die intraorale Diagnostik.



Ausgezeichnete Bildqualität



Erlaubt okklusale 4C-Projektionen



Erfüllt Ihre diagnostischen Anforderungen



Liefert dauerhaft hochqualitative Ergebnisse

Die moderne Lösung für intraorale Diagnose.

Scan eXam™ One – eine Lösung für alle Anforderungen.

Die hochentwickelte digitale Bildbearbeitung liefert dauerhaft verlässliche Aufnahmen. Durch optimierte Werkseinstellungen kann das Gerät sofort in Betrieb genommen werden. Die Einstellungen können sehr einfach und jederzeit an die Präferenzen des Zahnarztes angepasst werden.



Digitalisierung, einfach gemacht.

Ausgezeichnete Ergebnisse im Handumdrehen.

Der KaVo Scan eXam™ One liefert klare und scharfe Bildergebnisse mit akkurat dargestellten Graustufen. Die erforderlichen diagnostischen Informationen werden bis ins kleinste Detail abgebildet.



So flexibel wie ein Film – für hohen Patientenkomfort.



Einfache Bedienung von der Frontseite – sehr platzsparend.

Die passende Größe für Ihre Anforderungen.

Die verschiedenen Speicherfoliengrößen, die für den KaVo Scan eXam™ One erhältlich sind, können für Bissflügel-, periapikale und okklusale Aufnahmen verwendet werden. So einfach und flexibel einsetzbar wie ein Film.

Größe 0

22 x 31 mm
734 x 1034 Pixel
1.08 MB

Größe 1

24 x 40 mm
800 x 1334 Pixel
1.53 MB

Größe 2

31 x 41 mm
1034 x 1368 Pixel
2.03 MB


Größe 3

27 x 54 mm
900 x 1800 Pixel
2.32. MB



Ihr Workflow.

So einfach zu platzieren wie ein Film.

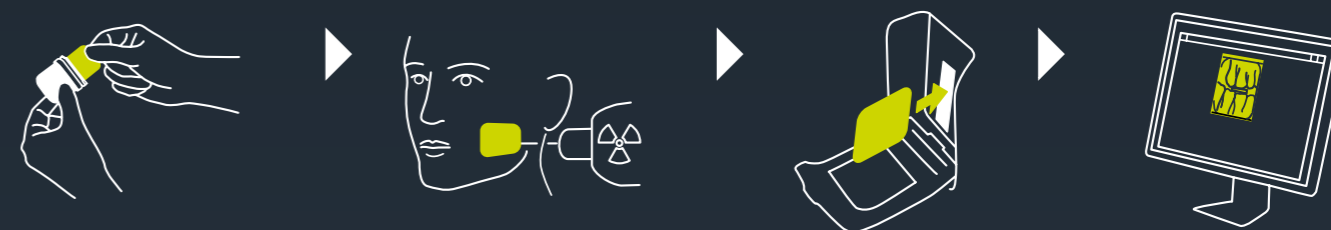

Einfacher und schneller Workflow.

Die flexiblen und wiederverwendbaren Speicherfolien ermöglichen einen einfachen und zügigen Workflow. Der gesamte Prozess vom Auslesen der Aufnahme bis zur Darstellung auf dem Bildschirm geht in Sekundenschnelle. Das System kann bei normalem Tageslicht bedient werden; es sind keinerlei Chemikalien notwendig.

Sicherer Workflow.

Der KaVo Scan eXam™ One bietet erhöhte Sicherheit im Workflow durch das Anzeigen des Patientennamens und der Aufnahmestationskennung im Display. Mit dem iDOT™ Markierungssystem können Sie zurückverfolgen, mit welcher Speicherfolie eine bestimmte Röntgenaufnahme gemacht wurde.



Eine Lösung für alle.

Einzelplatz- oder Netzwerknutzung.

Der KaVo Scan eXam™ One ist die perfekte Wahl für Ihr persönliches Röntgenaufnahmen-Konzept am Behandlungsplatz. In einem Netzwerk können bis zu vier Anwender auf das System zugreifen.

Ansprechendes Design.

Der KaVo Scan eXam™ One ist äußerst platzsparend und sieht gut aus! Wählen Sie zwischen fünf trendigen Farben – eine davon wird perfekt in Ihre Praxis passen.



Technische Daten.

Technologie	Wiederverwendbare Röntgenspeicherfolie
Pixelgröße	30 µm / 60 µm, wählbar
Scanner-Auflösung	17 lp/mm
Farbtiefe	16 bit
Verbindung	Standard-Netzwerkverbindung (Ethernet RJ45), DHCP
Abmessungen	168 mm x 233 mm x 328 mm
Gewicht	4 kg (8 lbs)
Betriebsspannung	100-240 VAC, 50/60 Hz
Betriebssystem	Windows 7, Windows 8.1 oder Windows 10

Abmessungen.

