



DAS FLEXIBLE PROPHYLAXE-GERÄT *mit Servicevorteil*

EIN PROPHYLAXE-GERÄT – VIELE MÖGLICHKEITEN

Sie suchen ein neues Prophylaxe-Gerät für Ihre Praxis?
B.A. International Ultimate UC500L ist die richtige Wahl,
wenn Sie ...



... Prophylaxe nach Ihren Vorstellungen verwirklichen wollen

B.A. International Ultimate UC500L gibt keinen festen Behandlungsablauf vor. Sie entscheiden, wie Sie das System verwenden wollen. So können Sie es einfach in die Prophylaxe-Prozesse Ihrer Praxis einbinden. Mithilfe des Pulverstrahlgeräts und des Zahnsteinentferners decken Sie ein umfassendes Indikationsspektrum ab. So können Sie individuell auf die jeweilige Gesundheitssituation des Patienten eingehen.



... die Wirtschaftlichkeit im Blick behalten möchten

B.A. International Ultimate UC500L bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und besticht mit einem besonders großen Lieferumfang. Verbrauchsmaterial, Prophylaxepulver und Zubehör sind günstig, sodass Sie Folgekosten reduzieren.



... von umfassendem Service profitieren wollen

Henry Schein Dental bietet Ihnen ein umfassendes Servicepaket. Wir machen Sie und Ihre Mitarbeiter mit dem Gerät vertraut, helfen Ihnen bei Anwendungsfragen und warten nach Herstellervorgaben. Wir kümmern uns auch um Reparaturen und stellen Ihnen unterdessen ein Mietgerät zur Verfügung. So können Sie Ihre Prophylaxe-Behandlung ungestört fortsetzen.

Interessiert? Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen das Gerät, das Indikationsspektrum und das Zubehör im Detail vor. Bei Fragen berät Sie gerne Ihr persönlicher Ansprechpartner von Henry Schein Dental.



PRODUKTHIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK

B.A. International Ultimate UC500L erleichtert Ihre Prophylaxe-Behandlung und bietet hohen Komfort für Patienten.



KOMBI-LÖSUNG FÜR EIN BREITES INDIKATIONSSPEKTRUM

Mit dem Prophylaxe-Gerät decken Sie sowohl die Zahnsteinentfernung per Ultraschall als auch die Pulverstrahlreinigung (supra- und subgingival) inklusive Politur ab. Der jeweilige Modus wird automatisch gestartet, wenn Sie das entsprechende Handstück entnehmen.



EINFACH BEDIENBARES TOUCH-DISPLAY

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und lässt sich per Touch-Funktion intuitiv bedienen.



WASSERVERSORGUNG – FLEXIBEL UND ANGENEHM

Sie können Spülflüssigkeit, Wasser aus den mitgelieferten Flaschen oder externes Wasser verwenden. Das Wasser wird dank integrierter Heizung erwärmt, sodass die Reinigung besonders angenehm für die Patienten ist.



SCHNELLE SPÜLUNG

Im Modus Säuberung werden die Handstücke und Versorgungsschläuche im Gerät innerhalb von circa 30 Sekunden automatisch gespült. Zur Aufbereitung der Handstücke sind diese schnell und einfach zerlegbar.



UMFANGREICHES ZUBEHÖR UND PASSENDES PROPHYLAXEPULVER

Die Übersicht über das Zubehörpaket bei Erstauslieferung finden Sie auf Seite 10, die Details zu den Prophylaxepulvern auf Seite 11.

DAS LEISTET DAS KOMBI-GERÄT



Behandlung mit Ultraschall

Mit dem Ultraschallhandstück entfernen Sie Zahnstein sicher und effizient.

Ultraschall-Parodontalbehandlung

Sichere supragingivale und subgingivale Zahnsteinentfernung per Ultraschallhandstück mit hellem LED-Licht und einer vielfältigen Auswahl an Aufsätzen.



Elliptische Vibration

Dank der elliptischen Vibrationsbewegung ist der Betrieb auch bei parallel zur Zahnoberfläche ausgerichtetem Aufsatz (0-Grad-Winkel) möglich, wodurch ein Politur-effekt erzielt wird. Die Aufprallkraft wird zwischen Aufsatz und Zahn zerstreut, um den Behandlungskomfort zu erhöhen.

Aufsatz aus Titanlegierung

Der Aufsatz besteht aus einem Material mit geringerer Härte als die von Zahnzement und Zahnschmelz, sodass Zähne nicht beschädigt werden. Härte des Aufsatzes aus Titanlegierung: HRC30; Härte von Edelstahl: HRC50.



Behandlung mit Pulverstrahl

Bei der Pulverstrahlbehandlung wird über das Pulverstrahlgerät mittels Druckluft eine Mischung aus Pulver und warmem Wasser auf die Zahnoberfläche gesprüht.

Effektive Reinigung

Mit der Pulverstrahlbehandlung kann eine sehr gründliche Entfernung von Verfärbungen, Plaque, weichen Belegen und frischem Zahnstein auf Kauflächen, in den Zahnzwischenräumen, bei kieferorthopädischen Brackets und anderen schwer zu reinigenden Stellen erzielt werden.



Politur der Zahnoberflächen

Eine wichtige Funktion der Pulverstrahlbehandlung besteht in der Politur der Zahnoberflächen. Nach dem Polieren sind die Zahnoberflächen spürbar glatter, sodass sich Plaque und Verfärbungspigmente weniger leicht auf dem Zahn ablagern können.

Subgingivale Pulverstrahlbehandlung

Der Pulverausstoß erfolgt in drei Richtungen, und die Subgingivaldüse (Nozzle) ist um 360 Grad drehbar. Diese Methode kann Entzündungen an natürlichen Zähnen sowie Periimplantitis effektiv behandeln und die Tiefe der Zahnfleischtaschen verringern. Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren kann sowohl die Zahnoberfläche als auch die komplexe Gewindestruktur von Implantaten mit dieser Methode besser gereinigt werden.



EIN RECHNER ZEIGT IHR POTENZIAL

Mithilfe des Prophylaxe-Geräts B.A. International Ultimate UC500L fördern Sie die Mundgesundheit Ihrer Patienten. Doch wie gelingt es, möglichst viele von ihnen für die Behandlung zu gewinnen und so Ihre Praxisumsätze auszubauen? Hier unterstützt Sie Henry Schein Dental.

EINBEHANDLERPRAXIS IM VERGLEICH

Prophylaxe-
Patienten x Umsatz
pro Sitzung = Jahresumsatz

$$250 \times 80 \text{ €} = 20.000 \text{ €}$$

Beispiel niedrige Auslastung

$$1.500 \times 80 \text{ €} = 120.000 \text{ €}$$

Beispiel hohe Auslastung



Jetzt Umsatzpotenzial ermitteln:
www.prophylaxe-rechner.de


Die Prophylaxe-Behandlung mit konventionellen Handinstrumenten kostet viel Zeit. Mit B.A. International Ultimate UC500L gelingt die Behandlung hingegen deutlich schneller und effektiver. Dabei können Sie das Gerät flexibel in Ihr Konzept integrieren und die Behandlungen in hoher Qualität durchführen.

Belegte Wirksamkeit

Von dieser hohen Qualität profitieren Ihre Patienten gesundheitlich. Die Wirksamkeit einer professionellen Zahnreinigung (PZR) ist wissenschaftlich gut belegt. Wer sie regelmäßig in Anspruch nimmt, kann Karies und Parodontitis effektiv vorbeugen. Dies zeigt zum Beispiel die fünfte deutsche Mundgesundheitsstudie des Instituts der Deutschen Zahnärzte aus dem Jahr 2016.

Umsatzpotenzial mit Rechner ermitteln

Die professionelle Zahnreinigung bietet nicht nur einen gesundheitlichen Mehrwert für Patienten – sie stellt zudem eine zentrale Umsatzsäule für Zahnarztpraxen dar. Dabei lohnt es sich, die Auslastung der Prophylaxe gezielt zu erhöhen. Dies zeigt die Beispielrechnung links, die zwei gleich große Einbehandlerpraxen mit hoher und niedriger Auslastung vergleicht. Unterm Strich können Sie mit einer gut ausgelasteten Prophylaxe-Abteilung beachtliche Gewinne erzielen, da die gegenüberzustellenden Kosten im Verhältnis gering ausfallen.

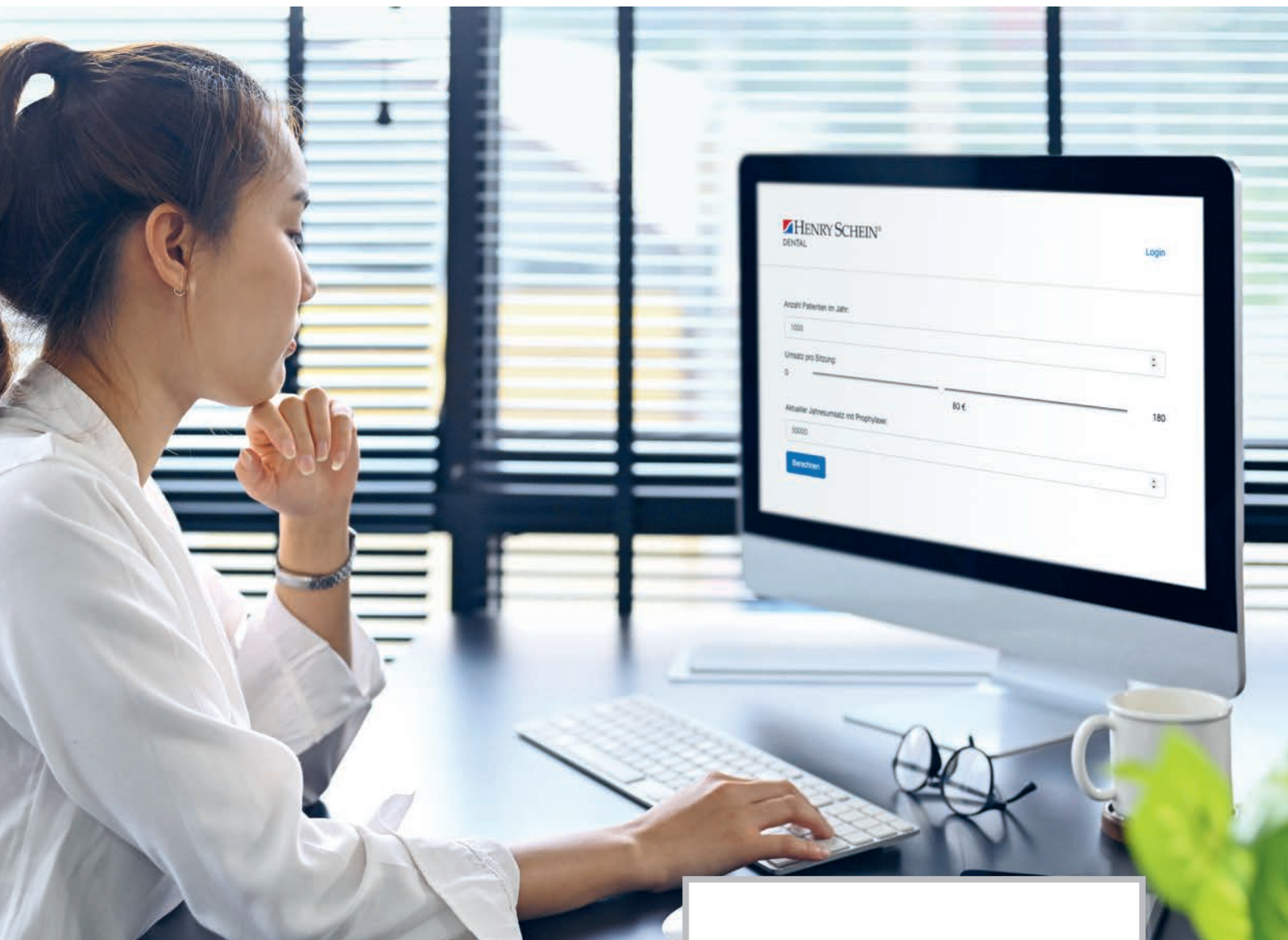

Sie wollen sich selbst einen Eindruck darüber verschaffen, wie stark Sie Ihre Prophylaxe-Umsätze steigern können? Nutzen Sie dafür einfach den Rechner von Henry Schein Dental unter **www.prophylaxe-rechner.de**. Sie brauchen nur wenige Angaben einzutragen – und schon sehen Sie Ihr zusätzliches Umsatzpotenzial.

Passende Empfehlungen für Ihre Praxis

Doch was genau ist nötig, damit Sie diese Umsatzsteigerung erreichen können? Hierzu berät Sie unser Team gerne. Es analysiert gemeinsam mit Ihnen den Status quo Ihrer Praxis und entwickelt geeignete Strategien und Maßnahmen, um Ihr Behandlungspotenzial auszuschoöpfen.

PROPHYLAXE-BERATUNG

Unser Team steht Ihnen zur Seite, um die Prophylaxe-Auslastung Ihrer Praxis zu steigern und so höhere Umsätze zu erzielen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin unter



[www.henryschein-dental.de/
beratung-prophylaxe](http://www.henryschein-dental.de/beratung-prophylaxe)

UMFANGREICHES ZUBEHÖR, BEWÄHRTER SERVICE

Bei uns bekommen Sie nicht nur ein hochwertiges Prophylaxe-Gerät – wir bieten umfassende Services und alles, was Sie gegebenenfalls an Zubehör benötigen.



Ansprechpartner

Unser Expertenteam für Kleingeräte berät Sie telefonisch zu allen Fragen rund um das Gerät. Sie erreichen die Hotline unter **0800 1234856**. Selbstverständlich können Sie sich auch an Ihren Fachberater wenden oder unser Online-Kontaktformular ausfüllen (siehe QR-Code auf Seite 9).




Wartung

Wartungen sichern die Funktionalität Ihres Prophylaxe-Geräts. Unsere Servicetechniker kümmern sich gerne darum. Mit Abschluss eines Wartungsvertrags nehmen wir Ihnen alle Aufgaben rund um die Prüftermine zuverlässig ab.



Reparatur

In unserer Kleingeräte-Werkstatt reparieren wir defekte Prophylaxe-Geräte schnell und zuverlässig. Die Auftragserteilung erfolgt bequem über unsere Website.

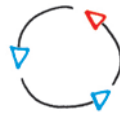

Mietgeräte

Wenn Ihr Prophylaxe-Gerät plötzlich ausfällt, gewartet oder repariert wird, stellen wir gerne ein Mietexemplar bereit. So können Sie die Behandlung reibungslos fortführen.



Zubehör

Gerät, Pulver, Zubehör – bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Einen Überblick können Sie sich auf den folgenden Seiten verschaffen.

Lieferumfang des Geräts

Ultraschallhandstück
mit LED BAC5L
2x

Pulverstrahlhandstück
BAC5P supragingival
BAC5B subgingival
je 1x

Einwegdüsen (Nozzle)
für Handstück BAC5B
10x

Drehmomentschlüssel
2x

Sterilisationskassette
für Handstücke **3x**

Flüssigkeitsbehälter
600 ml/ 1.400 ml
je 1x

Pulvertank, sub- und
supragingival **je 1x**

Reinigungsnadel
kurz/lang **je 1x**

Ultraschallspitzen
BAC33E/BAC50RE/
BAC50LE/BAC56E/
BAC59E **je 2x**

Ultraschallspitzen
BAC60E/BAC62E
BAC94E/BAC95E
je 1x

Multifunktionsfußschalter
1x

Versorgungsschlauch
Wasser / Luft
je 1x

* Inklusive Netzadapter, Luft- und
Wasserfilter inkl. Schlüssel, Ersatz-
LED, Kupplungsstecker, T-Stück.
**In der Erstausslieferung ist kein
Prophylaxepulver enthalten.**

PROPHYLAXEPULVER IN DER ÜBERSICHT

Die BA Ulticlean Prophylaxepulver Standard und Perio Plus bieten die folgenden Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten.

		Standard	Standard	Perio Plus
Anwendungsgebiet		supragingival	supragingival	sub- und supragingival
Geschmack		Zitrone	Minze	Neutral
Materialgrundlage		Natriumhydrogen-carbonat	Natriumhydrogen-carbonat	Tagatose
Partikelgröße Ø		40 µm	40 µm	15 µm
pH		bei 20 °C: 8,1–8,4	bei 20 °C: 8,1–8,4	(10 g/l) bei 20 °C: 6–8
Zahn	Verfärbungen/ jugendliche Zähne	✓	✓	✓
	Schmelz	✓	✓	✓
	Kreideflecken auf dem Schmelz	✗	✗	✓
	Dentin	✗	✗	✓
Weichgewebe/ Schleimhaut	Zahnfleisch	✗	✗	✓
	Zunge und Gaumen	✗	✗	✓
Restauration	Hybrid-Komposit	✗	✗	✓
	Glas-Ionomer	✗	✗	✓
Implantat	Implantat / Mukositis	✗	✗	✓
Kieferorthopädie	Brackets und Apparaturen	✗	✗	✓
		✓	✓	✓
	 	✗	✗	✓
	 	✗	✗	✓
Artikelnummer		9796714 (4x300g)	9796715 (4x300g)	9796716 (4x100g)
Artikelnummer		9021187 (300g)	9021188 (300g)	9021189 (100g)



TITANIUMAUFsätze FÜR JEDEN EINSATZZWECK

Das Ultraschallhandstück können Sie mit unterschiedlichen Aufsätzen aus Titanlegierung versehen und so ein breites Behandlungsspektrum abdecken.



	Artikelnummer	Größe	Beschreibung
	1095535	BAC33E Aufsätze	Zur Entfernung von Zahnstein tief in der Parodontaltasche und zum Ausspülen der Parodontaltasche
	1095536	BAC50RE Aufsätze	Zur subgingivalen Lokalisierung von Zahnstein und zum subgingivalen Scaling
	1095537	BAC50LE Aufsätze	Zur subgingivalen Lokalisierung von Zahnstein und zum subgingivalen Scaling
	1095538	BAC52E Aufsätze	Zum supragingivalen Scaling und zur Entfernung von Zahnstein/Zahnbelägen
	1095540	BAC56E Aufsätze	Zur Entfernung größerer Zahnsteinablagerungen
	1095539	BAC59E Aufsätze	Zur subgingivalen Lokalisierung von Zahnstein und zum subgingivalen Scaling
	1095544	BAC60E Aufsätze	Zur Vorbereitung und Spülung des Wurzelkanals
	1095545	BAC62E Aufsätze	Zur Spülung des Wurzelkanals
	1095543	BAC90E Aufsätze	Zur Reinigung von Implantaten und Zahnrestauration
	1095541	BAC94E Aufsätze	Zur Reinigung von Implantaten und Zahnrestauration
	1095542	BAC95E Aufsätze	Zur Reinigung von Implantaten und Zahnrestauration

CART-SYSTEM UNTERSTÜTZT EFFIZIENTES ARBEITEN

Das speziell entwickelte Cart-System für das Prophylaxe-Gerät B.A. Ultimate UC500L erleichtert hygienisches und effizientes Arbeiten.

Kompaktes und perfekt passendes Design

Das sehr gut gestaltete Kabelmanagementsystem ermöglicht einen hygienischen und funktionalen Arbeitsplatz. So können Sie zum Beispiel den Netzadapter und die Versorgungsschläuche im Inneren des Carts verstauen.

Nahtlose Bewegung – drehbar um 360 Grad

Mit den hochwertigen Rollen ist das Cart so konzipiert, dass es die beste Manövrierfähigkeit im Arbeitsbereich bietet.

Gute Ergonomie

Das effektive Platzmanagement durch die vorderen Aufbewahrungsfächer ermöglicht den einfachen Zugriff auf die Prophylaxepulver und die Pulvertanks.

ABMESSUNGEN:

H: 826,5 mm

B x T unten: 330 x 361 mm

B x T oben: 220 x 286 mm



Multifunktionsfußsteuerung

Per Fußschalter steuern Sie bequem die wichtigsten Modi des Geräts („Wasserfrei“, „Booster“, „Säubern“ und „Standard“). Zudem können Sie den Schalter einfach per Fuß anheben und ihn so neu platzieren. Möglich macht dies ein extra angebrachter Bügel.

ZUBEHÖR UND PRODUKT- WELT AUF EINEN BLICK

Zusätzlich zur umfassenden Standardausstattung des Geräts (siehe Seite 10) können Sie bei uns jederzeit weiteres Gerätezubehör, Verbrauchsmaterialien oder ergänzende Einmalprodukte bestellen.



Artikelbezeichnung	Artikelnummer
BA Ulticlean Combi UC500L Prophylaxe	1095508
BA Geräte-Cart für UC500L	9022055
Handstücke	
BA Pulverstrahlhandstück BAC5P	1095509
BA Pulverstrahlhandstück Perio BAC5B	1095510
BA Ultraschallhandstück BAC5L	1095511
BA Nozzle Pulverstrahlhandstück Perio (10 Stk.)	1095521
BA Sterilisationsbox Hdst. BAC5P/BAC5B	1095515
BA Sterilisationsbox Hdst. BAC5L	1095516
Ersatzbehälter	
BA Pulverbehälter UC500L supragingival	1095517
BA Pulverbehälter UC500L subgingival	9084532
Flüssigkeitsbehälter 600 ml	1095524
Flüssigkeitsbehälter 1.400 ml	1095523
Weitere Ersatzteile zum Gerät	
Drehmomentschlüssel für BAC132E	1095530
LED-Ersatzlampe	1095534
Reinigungsnadel lang	1095531
Reinigungsnadel kurz	1095532
Luftfilter	1095526
Wasserfilter	1095527



Alle Produkte finden Sie mit weiterführenden Informationen und Bildern im Onlineshop: www.henryschein-dental.de/shop

Artikelbezeichnung

Artikelnummer

BA Ulticlean Prophylaxepulver

Standard, Zitrone, 4 x 300g	9796714
Standard, Zitrone, 1 x 300g	9021187
Standard, Minze, 4 x 300g	9796715
Standard, Minze, 1 x 300g	9021188
Perio Plus, neutral, 4 x 100g	9796716
Perio Plus, neutral, 1 x 100g	9021189

HS-Accessoires / Produkte

Wangenspreizer	9008145
Schutzbrille	9793109
Einmal-Handtücher	9003325
Mundspüllösung	9009663
Prophylaxe-Bürstchen & Cups	5722531
Prophylaxe-Paste	9889944
Zahnseide	9796367
Interdental-Bürsten	9883514
Patientenservietten	9001030
Patientenservietten-Halter	9001746
Patientenumhänge	9001380
Trayeinlagen	9001318
Speichelsauger	9883110
Absaugkanülen	5722770
Mundspülbecher	9884318
Schaumstoffpellets	9001828



Impressum

Herausgeber:

Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Monzastraße 2a, 63225 Langen

Bildnachweise:

Henry Schein Dental, Christian Heyse/Profilwerkstatt
Seite 9: Prathan Chorruangsak/Alamy Stock Photo

Art.Nr. 9084540

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Übermittlung dieser Werbung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Dental Deutschland GmbH unter werbewidersprueche@henryschein.de zu widersprechen.



FRAGEN?

Kontaktieren Sie uns:

Persönlich: Ihr Fachberater ist gerne für Sie da.

Telefonisch: Lassen Sie sich von unserem Expertenteam für Kleingeräte beraten:
0800 1234856

Online: Hinterlegen Sie einfach Ihre Kontaktdaten. Wir melden uns zu Ihrem Wunschtermin.



www.henryschein-dental.de/beratung-prophylaxe